

FIXER



Radiofrecuencia Fraccionada



FIXER —————
**Radiofrecuencia fraccionada
con microagujas**

El renacimiento de la radiofrecuencia fraccionada.



servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Copyright © 2022 Tentrek Lasers. All rights reserved



FIXER

000000005 DOWN

- M1
- M2
- M3
- M4
- SAVE

HANDPIECE

OUTPUT

Needle Length
4.0 mm

Output Level
20

Needle Operation
Automatic Manual

Repeat Time
OFF

Needle Tip
Movement Stillness

READY / STANDBY
STANDBY

FIXER

TENTREK

Repara, rejuvenece y reafirma la piel

Fixer es un sistema inteligente de **microagujas** que entrega **energía térmica (radiofrecuencia)** de forma fraccionada en capas específicas de la dermis, con un impacto significativo pero de mínima afección a la epidermis.

Mediante este proceso, Fixer logra la retracción de las fibras de **colágeno** y **elastina**, estimulando la producción de estas, rejuveneciendo la piel mejorando su **tono, elasticidad** y **textura**.

La regeneración se da entonces de adentro hacia afuera.

Su revolucionario software es fácil de usar. Usuarios y pacientes aman los resultados del Fixer debido a que son **100% confiables** y **seguros**.




Experimenta cada detalle

La nueva forma de rejuvenecer

Fixer es la primera tecnología robótica de radiofrecuencia bipolar capaz de irradiar hasta **4mm** de profundidad en la piel con enorme precisión.

Su tecnología de **49 microagujas (tip insulado, no insulado y ablativo)** tienen un revestimiento en **oro** que aísla y transporta la radiofrecuencia eficientemente hasta las puntas, emitiendo la energía hasta las últimas **300µm** de cada una de las microagujas.

Fixer se sitúa como la tecnología **#1** con mayor tendencia en la industria del rejuvenecimiento cutáneo. **Rápida recuperación, seguridad y precisión.**

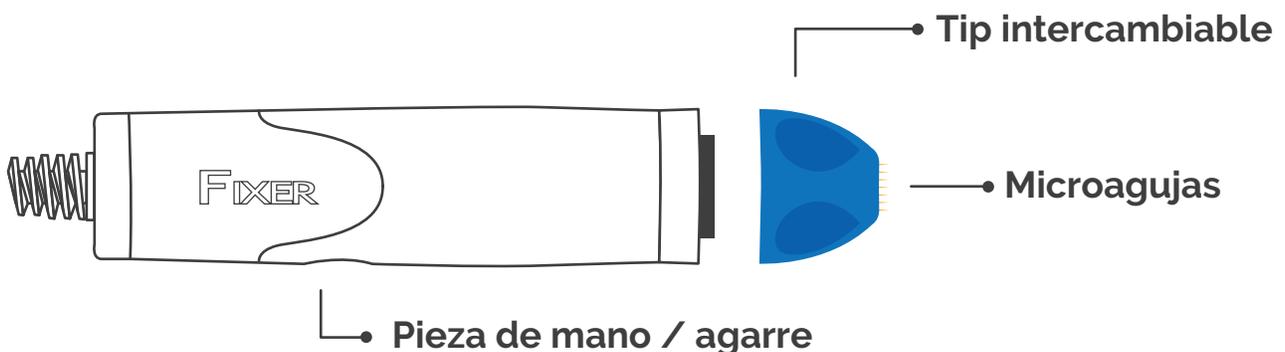



Variedades de Tips

Ideales para múltiples tratamientos


Fixer presenta sus Tips con tecnología **UFN** (*Ultra Fine Needles*) bañados en oro, capaces de hacer una inserción confortable y precisa en la piel.

- ✓✓ Resultados con mayor rapidez
- ✓✓ Mayor seguridad y precisión
- ✓✓ Minimizan el dolor y efectos secundarios
- ✓✓ Rápida epitelización y mínima incapacidad
- ✓✓ No producen daños epidérmicos

Tip Ablativo

Su característica principal es permanecer estático a **400µm**, siendo el preferido para los tratamientos **superficiales epidérmicos**, trabajando con precisión y eficiencia.

Ideal para: **arrugas finas, léntigos, cicatrices, rejuvenecimiento de manos y cuello.**

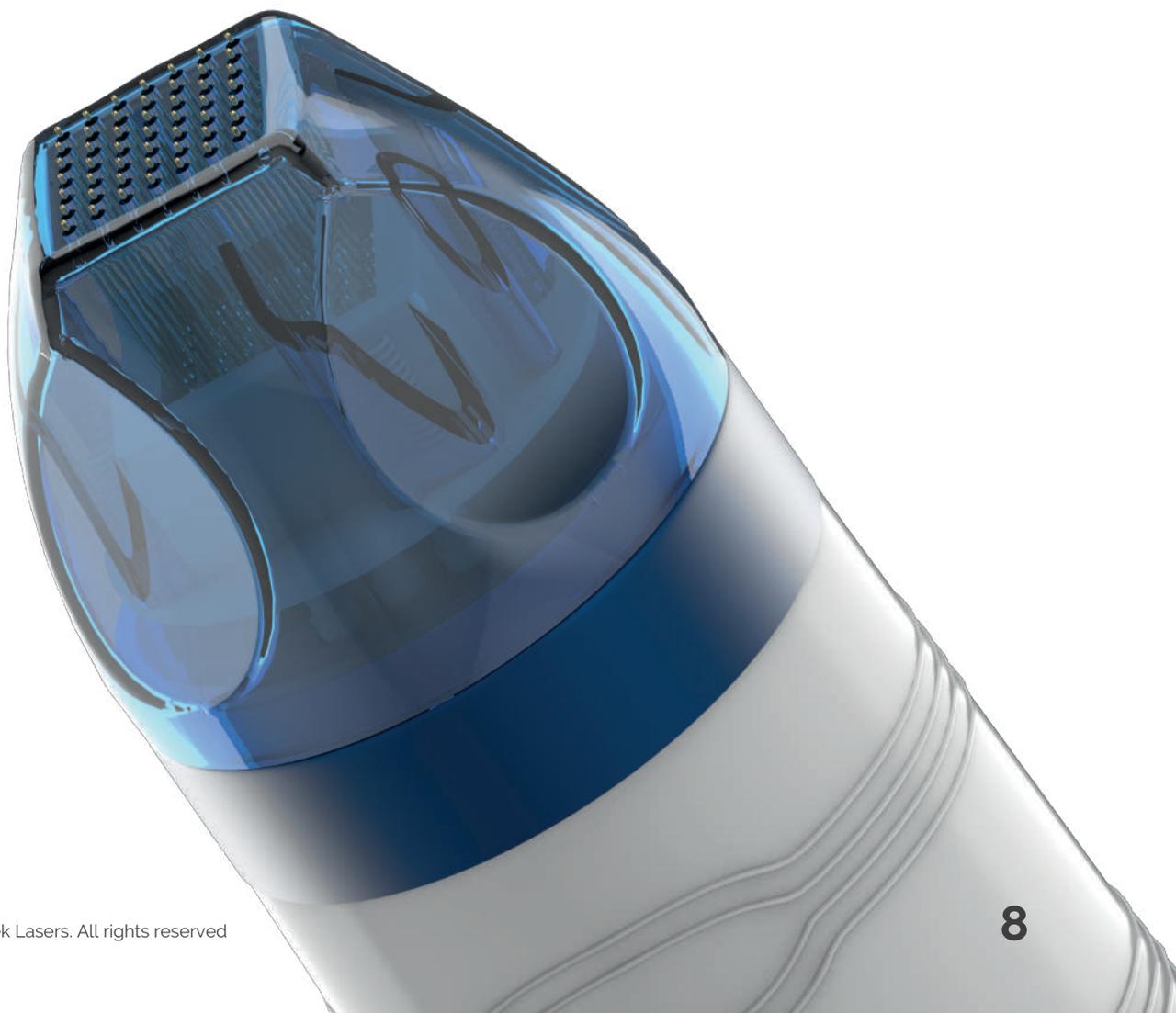

Tip insulado

Gracias a su protección epidérmica, el Tip insulado emite la radiofrecuencia hasta las últimas **300µm** de la micropaguja, y puede ir desde **0,1** hasta **4mm** de profundidad.

Ideal para: **lifting de cara, cuello, escote, brazos y abdomen, cicatrices de acné y acné activo, arrugas profundas y estrías.**

Tip no insulado

Capaz de irradiar la totalidad de la zona tratada desde la epidermis hasta la dermis. Puede ir desde **0,1** hasta **4mm** de profundidad.

Ideal para: **hiperhidrosis axilar, rejuvenecimiento avanzado, cicatrices (exclusivamente fototipos claros).**




Reviver

By FIXER

Reviver es la próxima generación de tratamientos confortables para pieles más jóvenes, asegurando la máxima comodidad a su vez que entrega resultados de gran calidad.


Tiene un spot más pequeño de **36 pines insulados**, en comparación con la pieza estándar, teniendo acceso a áreas como la **periorbital** y **peribucal**. Posee un gran control de energía y profundidad, ideal para tratamientos corporales y faciales.

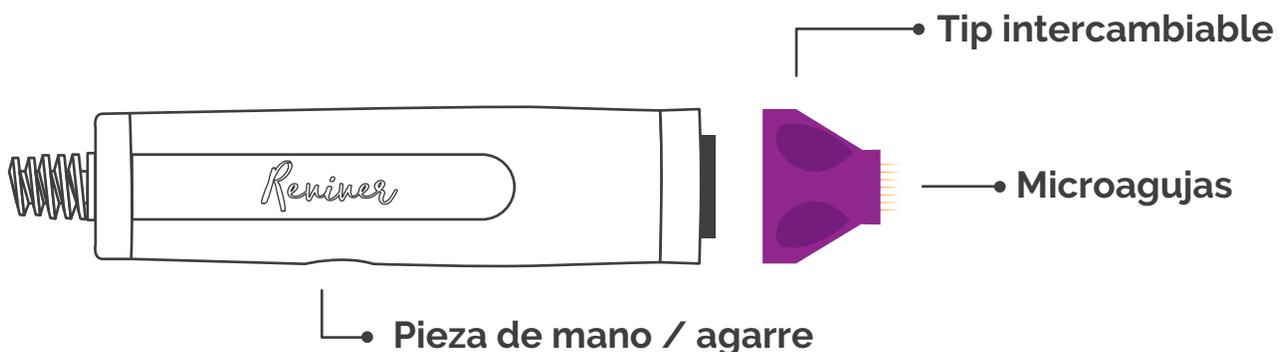

JuvenTip

Cuenta con 36 microagujas insuladas un poco más delgadas que el Tip estándar y puede ir desde **0,1** hasta **4mm** de profundidad.

Ideal para: **arrugas periorbitales, línea nasogeniana** o lesiones pequeñas como **cicatrices posquirúrgicas**.

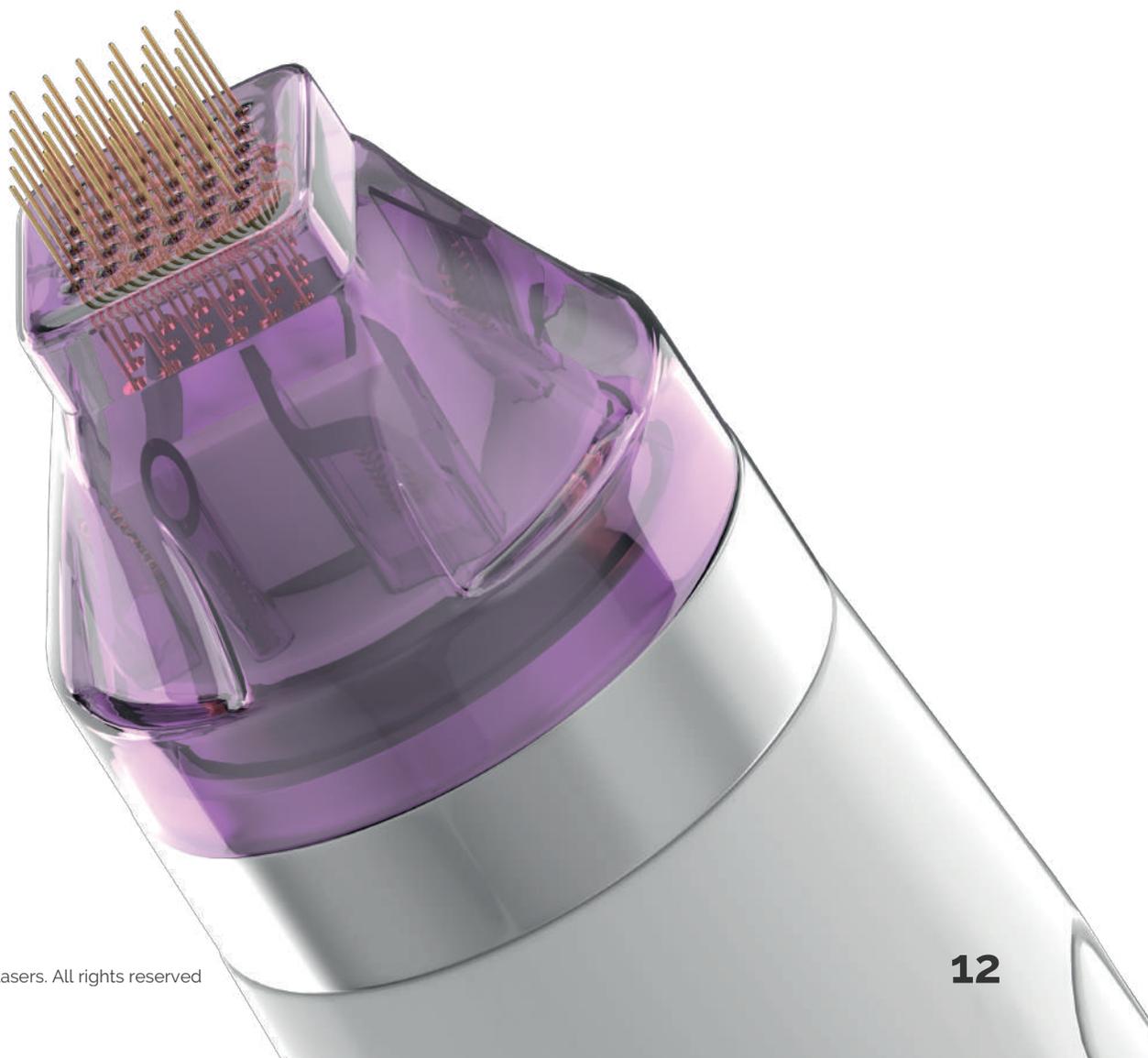

Fixer Robotics

Procedimientos seguros y completos

Fixer es el único equipo del mercado que integra **software de tecnología robótica**, el cual permite controlar la profundidad de los Tips desde **0,1mm**, ofreciendo a sus usuarios una precisión sin precedentes y de resultados extraordinarios.

Su software es de fácil manejo y personalizable, permitiéndole al usuario guardar parámetros dentro de su memoria y utilizarlos nuevamente según convenga.

Gracias a su tecnología, los tiempos de recuperación luego de cada tratamiento con Fixer son cortos, siendo desde **horas** hasta un par de **días**.



Casos Clínicos

Conoce algunos resultados obtenidos con Fixer:



ESTRIAS

Cortesía: Dra. Andrea Galeano



BODY BY FIXER

Cortesía: Dra. Estefania Bustamante



FACE LIFT

Cortesía: Dr. Iván Diazgranados



ESTRÍAS

Cortesía: Dra. Tulia Copete



CICATRIZ

Cortesía: Dra. Andrea Galeano



— Ficha técnica

General	Radiofrecuencia fraccionada
Frecuencia de pulso	0.7 a 2Hz
Duración del pulso	1~100ms
Frecuencia de salida	1MHz, bipolar
Densidad	49 puntos (agujas 7×7)
Modos operativos	Invasivo/No invasivo
Área de tratamiento	225mm ² (15mmx15mm)
Profundidad agujas	0.1~4mm
Alimentación	100/220V, single phase, 50/60Hz
Dimensiones (al*an*prof)	1000x270x430mm
Peso	22kg
Pantalla	LCD Color Touchscreen of 8.4"

FIXER



FIXER

Registro sanitario:
2015EBC-0013808
Resolución:
No. 2015042113

www.tentreklasers.com



@tentreklasers



RV 01.2024