

Fraclight



Sofisticado IPL Fraccionado

Fraclight _____

IPL Fraccionado

**Novedoso,
sofisticado y
muy seguro.**



servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Copyright © 2022 Tentrek Lasers. All rights reserved





SMART MODE
SAN TYPE II

SHR

SET

BACK

CHILLER

Current/SET

00 °C



Fluence
0.00
J/cm²



Frequency
1 3 5
7 10

Standby

Ready

P1 0.0 ms OFF 0.0 ms

P2 0.0 ms P3 0.0 ms

Pulse Type

1

2

3

Shot Counter



El primer IPL fraccionado del mercado

Fraclight trata una amplia gama de lesiones pigmentarias a través de sus **140 microceldas fraccionadas**, emitiendo una banda ancha de luz que le permite tratar varios objetivos a la vez y así mejorar, en general, la calidad de la piel.

Fraclight logra estimular al fibroblasto para la formación de nuevo colágeno, cubriendo una gran cantidad de tratamientos con sus longitudes de ondas fraccionadas: **rosácea, lesiones pigmentarias, acné activo, léntigos solares, arrugas finas, telangiectasias, fotorejuvenecimiento**, entre otros.

Gracias a su amplio spot, Fraclight emite energía de manera controlada y eficiente.

Fraclight




Siempre homogéneo

Tratamientos seguros con la mejor tecnología

Fractional Concept

Fraclight garantiza una entrega de energía homogénea gracias a su diseño **fraccionado**, el spot se divide en micro celdas independientes logrando emisiones uniformes y controladas térmicamente en tiempo real (**RTCTECH**).

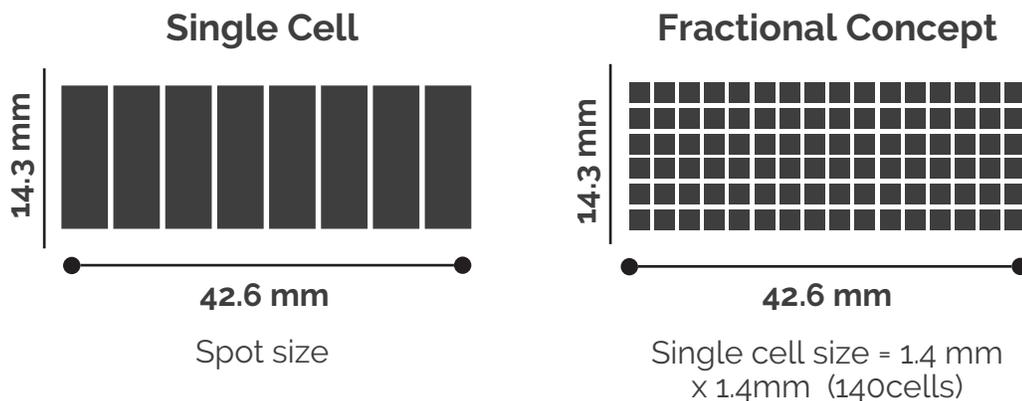

Real Time Cooling - RTCTECH

Su tecnología cuenta con **sensores** que permiten la visualización de la temperatura en tiempo real, evitando quemaduras o cambios pigmentarios.



Smart Mode


Sistema inteligente e intuitivo

Technology 3Tech es un sistema inteligente e intuitivo que permite seleccionar el tratamiento protocolizando los parámetros del equipo automáticamente, minimizando el error humano en tan sólo **3 clics**:

1. Tratamiento: al ingresar al menú inteligente, Fraclight permite elegir el tipo de tratamiento que se va a realizar ajustando los parámetros de manera automática.

2. Elección de fototipo: una vez elegido el tratamiento deseado, el siguiente paso es la elección del fototipo de piel, comenzando desde el **1** hasta el **5**.

3. Ready! tercer y último paso que hará que el equipo comience con el tratamiento elegido.

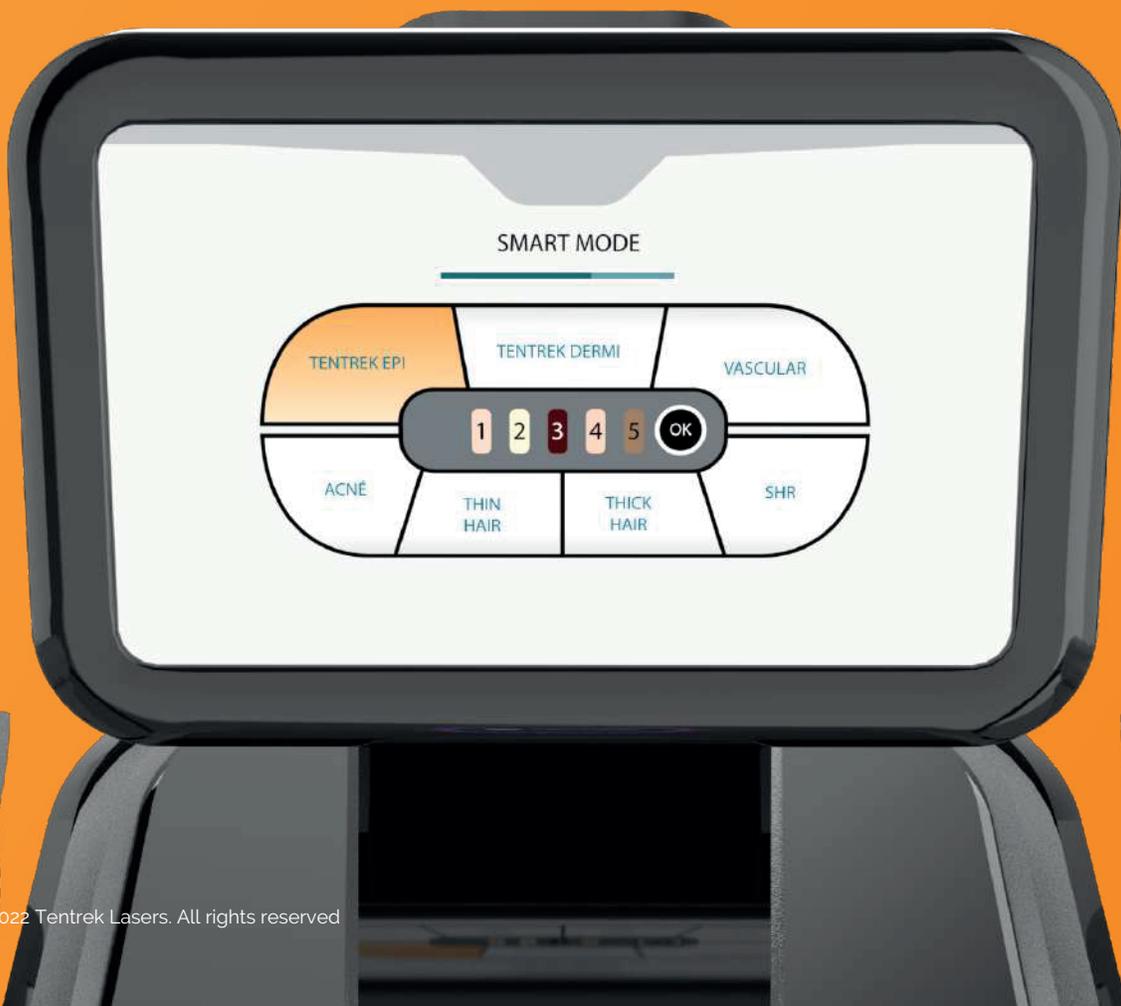


Un IPL como ningún otro

Mayor seguridad y comfort en cada disparo

Rotating Technology - RTLTECH

Fraclight permite elegir fácilmente un rango de longitud de onda deseado usando un rotador montado en la pieza de mano, sin reemplazar el filtro o la pieza de mano.

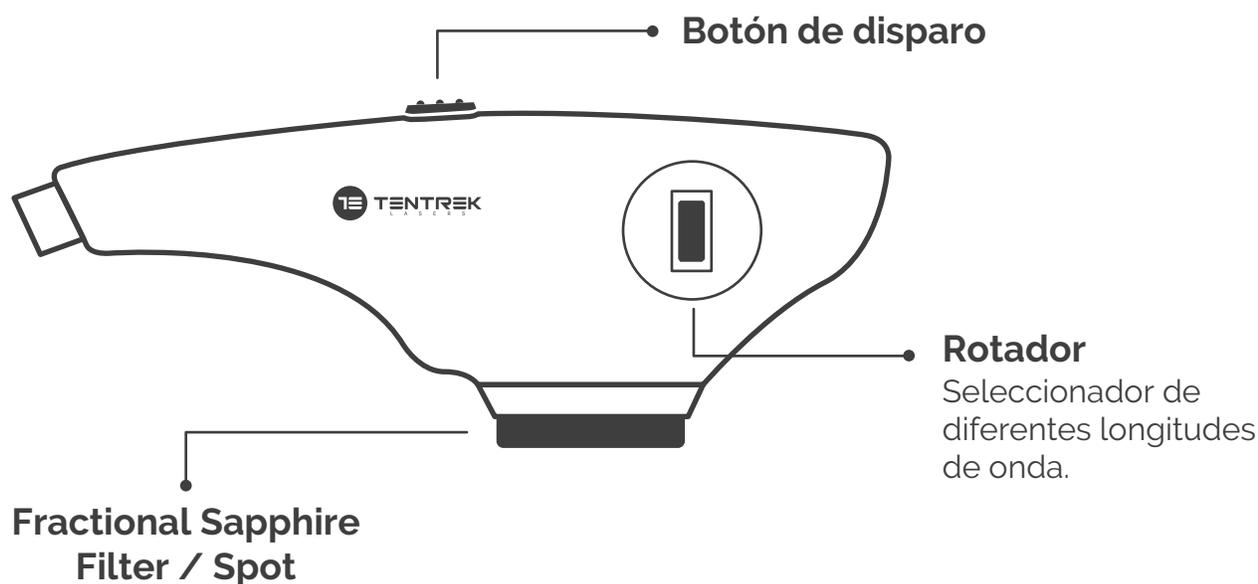

Fraclight permite una segura manipulación del equipo y maximiza los resultados de los tratamientos en cada fototipo de piel.

Fraclight



Múltiples longitudes de onda

Las longitudes de ondas fraccionadas de Fraclight pueden tratar efectivamente: **lesiones pigmentarias**, **fotorejuvenecimiento** y **fotodepilación**, con uno de los spots más grandes del mercado, devolviéndole a los pacientes el color natural de su piel.



Standard

K: 415 - 950nm

A: 560 - 950nm

C: 640 - 950nm



Fraclight

Gracias a su control de temperatura durante el tratamiento, Fraclight garantiza una alta seguridad y minimiza riesgos pigmentarios



Alexandrita

C: 640 - 1200nm

D: 695 - 1200nm

F: 755 - 1200nm

Casos Clínicos

Conoce algunos resultados obtenidos con Fraclight:



LESIONES PIGMENTARIAS
Cortesía: Dra. Olga Forero



LÉNTIGOS
Cortesía: Dra. Olga Forero



LÉNTIGOS

Cortesía: Dr. José Luis Martínez




FOTOREJUVENECIMIENTO

Cortesía: Adaskin Chile



PECAS

Cortesía: Dra. Yveliss Sierralta

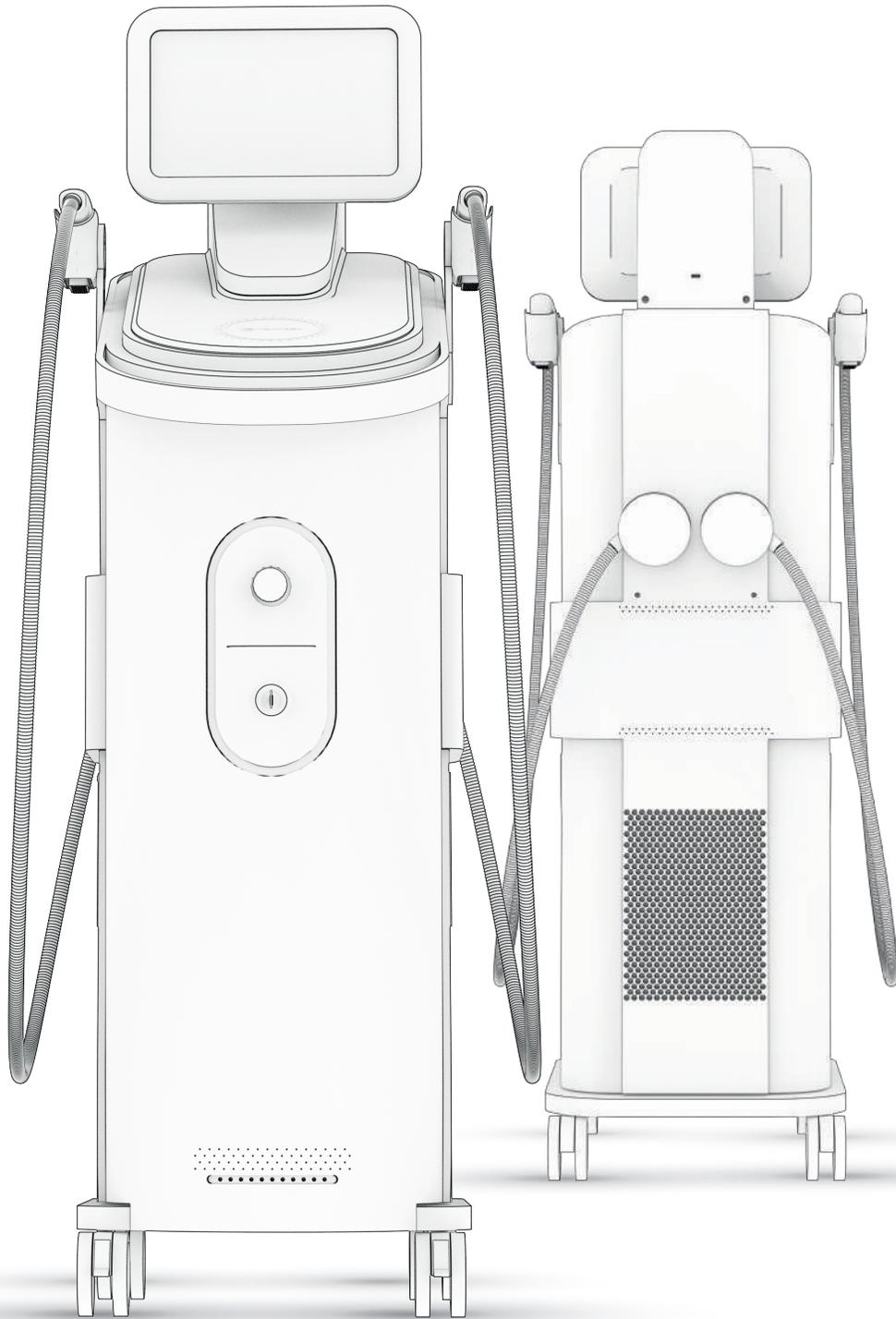

— Ficha técnica

Fuente de luz	Split (Intense) Pulsed Light (Xenon lamp)
Longitudes de onda	415~950nm, 560~950nm, 640nm~950nm
	Opcional 640~1200nm, 695~1200nm
Fluencia	5~40J / cm ²
Tamaño del spot	14.3 X 42.6mm
Secuencia de pulso	Single, Double, Tripple Pulses, SHR mode
Duración del pulso	2.0 ~ 35.0ms
Retardo del pulso	3.0 ~ 60.0ms
Ratio de repetición	1Hz, 3Hz, 5Hz (per second)
Conducción de luz	Quartz/ Sapphire Coupling
Alimentación	220V/16A, 50/60Hz
Dimensiones (al*an*prof)	1230x520x360mm
Peso	60Kg

Fraclight



Fraclight

Registro sanitario:
2018EBC-0018353
Resolución:
No. 2018033038

www.tentreklasers.com



@tentreklasers



Rv 07.2022