

Tensamax



Radiofrecuencia Monopolar

Tensamax —————
Radiofrecuencia monopolar

**Reduce grasa y
elimina celulitis.**



servicioalcliente@luxomedica.com
www.tentreklasers.com

Copyright © 2022 Tentrek Lasers. All rights reserved



Te

Lo último en tecnología de RF monopolar

Tensamax es una radiofrecuencia monopolar que cuenta con dos modalidades: **capacitiva** y **resistiva**, funcionando como técnica electroterápica la cual incrementa significativamente de **temperatura celular** y **tisular**, **reduciendo grasa**, **eliminando celulitis** y **redefiniendo curvas**.

Gracias a su tecnología, **Tensamax** logra penetrar la piel a través de emisiones de energía profunda, las cuales estimulan la producción de **colágeno** y **elastina**, resultando en una piel más **tersa** y **luminosa**.

Su tecnología de contorno corporal **NO** es invasiva, **NO** genera incapacidad o molestia alguna.

Tensamax




Dual Mode RF System

Piezas de mano de gran versatilidad


Resistiva

Esta pieza de mano se utiliza para cuatro aplicaciones fundamentales como lo son: **celulitis**, **tejido adiposo**, **grasa visceral** y la **fibrosis**.


Esta genera un calor muy profundo a través de una corriente de alta frecuencia, elevando la temperatura de la piel, **revitalizándola** y estimulando la síntesis de **colageno** y **elastina**, regenerando el tejido celular dañado.

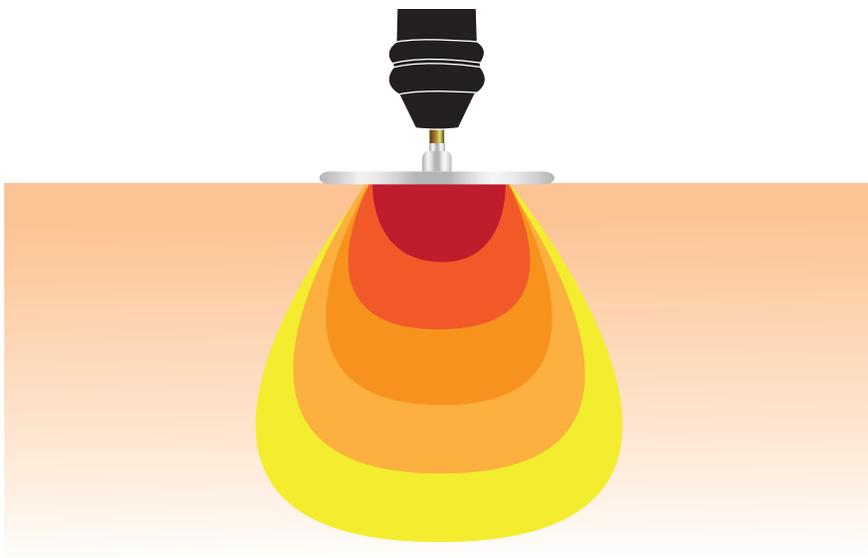


Transferencia eléctrica resistiva que se convierte en calor profundo en la piel por conducción térmica.

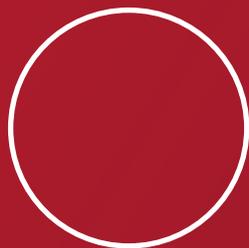

— Ø70mm —

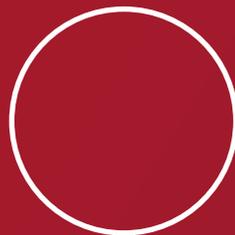

— Ø60mm —

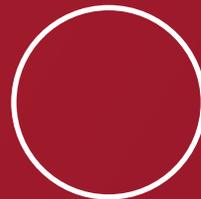

— Ø40mm —


Dual Mode RF System

Piezas de mano de gran versatilidad


Capacitiva

Esta pieza de mano maneja dos corrientes: **300** y **500Khz**, lo que le permite tener excelentes resultados tanto en tratamientos **post-operatorios** como de **tensado** de la piel.


Esta cubierta por un material especial que accede a un calor mucho más intenso en la parte superficial, permitiendo una realineación de todas las fibras de **colágeno** además de activar el **sistema linfático**.

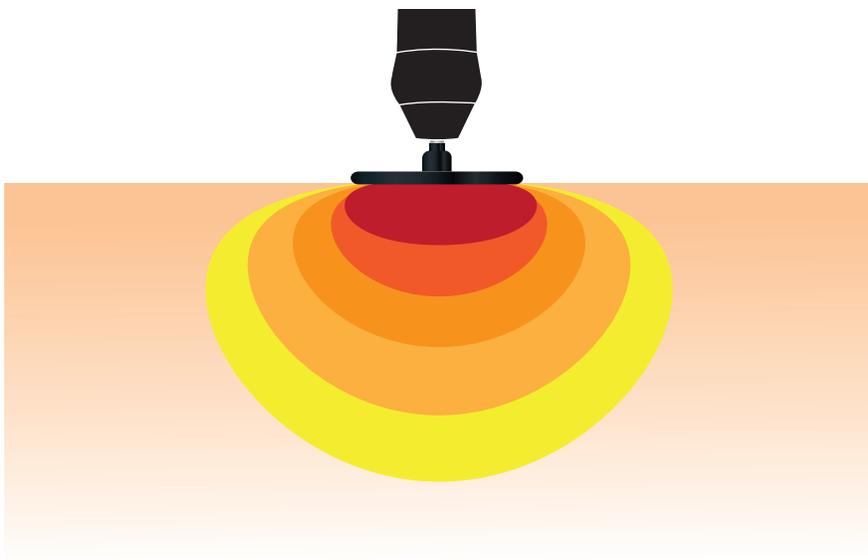

Transferencia eléctrica capacitiva que reduce la grasa subcutánea e incrementa la circulación sanguínea.

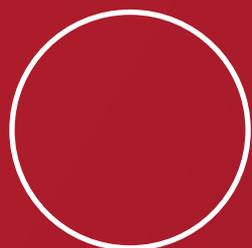

— Ø70mm —

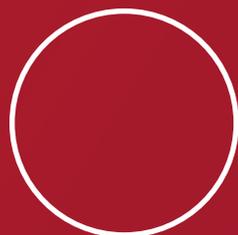

— Ø60mm —



— Ø40mm —



— 25mm —



— 50mm —

Tensamax Recovery


Recuperación para post-operatorios

Recuperación que antes tardaba varios meses, ahora en tan sólo pocas semanas con la tecnología de **Tensamax Recovery**: esta actúa acelerando la proliferación de **células sanas** las cuales promueven la **recuperación** y **oxigenación** de los tejidos.

Tensamax Recovery es el tratamiento preferido por los cirujanos y médicos de toda latinoamérica, mostrando resultados favorables desde la primera sesión.



Calentamiento
profundo y controlado
de la piel

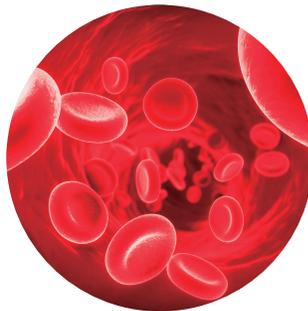

Aceleración de la
regeneración y drenaje
celular



Formación de nuevo
colágeno para darle
firmeza a la piel



Casos Clínicos

Conoce algunos resultados obtenidos con Tensamax:



ABDOMEN

Cortesía: Dr. Camilo Reyes



BODY SHAPING

Cortesía: Dr. Andrés Duran




BODY SHAPING
Cortesía: Dr. Dario Fernández



PAPADA
Cortesía: Dra. Delia Aldantette



GLÚTEOS
Cortesía: Dr. Andrés Durán

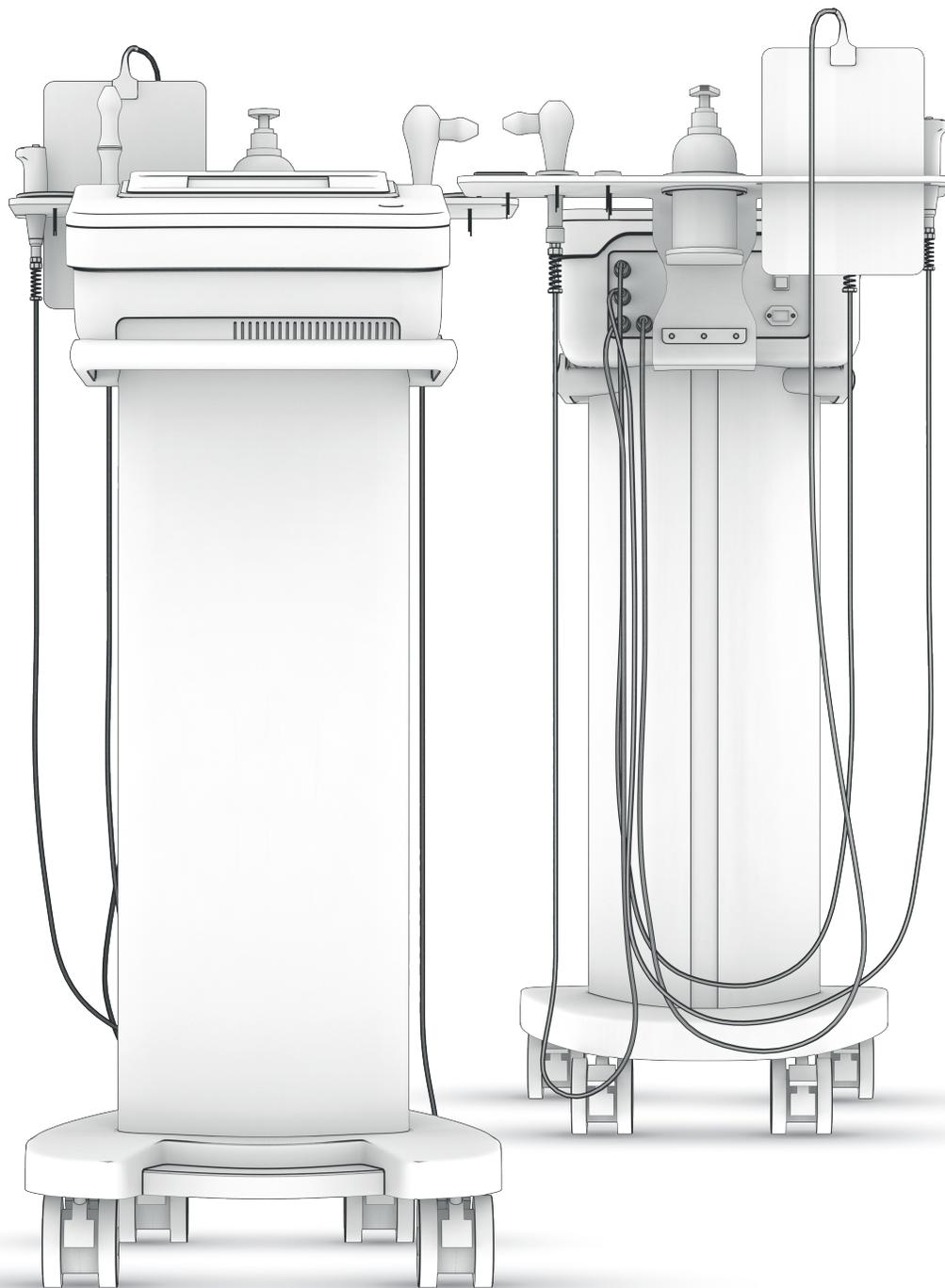

— Ficha técnica

General	High Frequency Therapy Device
Alimentación	110-240V AC 50/60Hz
Clasificación (EN60601-1)	Clase 1, Tipo BF
Fusibles	2 xT2A (5x20mm)
Dimensiones (al*an*prof)	1000x370x450mm
Peso	30kg
Parámetro de salida	Electrodos redondos / rectangular
Frecuencia portadora	0.3MHz y 0.5MHz
Intensidad máxima	80mA RMS
Temporizador	0 a 60 minutos
Sistema de seguridad	Inicio en cero, interruptor de seguridad

Tensamax



Tensamax

Registro sanitario:
2021DM-0006829-R1
Resolución:
No. 2021005246

www.tentreklasers.com



@tentreklasers



Rv 05.2022